

Hvordan applisere på hånd

For denne appliseringen trenger du én Mepilex® Ag 10 x 20 cm bandasje, én Mepilex® Ag 15 x 15 cm, og én Mepilex® Ag 10 x 10 cm.



1. Bruk Mepilex Ag 10 x 20 cm for å dekke hånden.



2. Brett bandasjen og lag fire like lange kutt (omtrent 1,5 cm lange).




3. Påfør bandasjen ved å la fingrene gli igjennom de fire hullene.



4. Bruk Mepilex Ag 15 x 15 cm for å dekke fingrene.



5. Klipp bandasjen i fire remser med lik bredde.

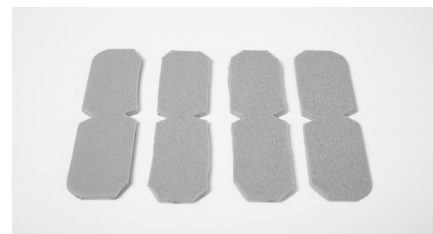

6. Klipp skrått av alle hjørnene på hver av remsene, og klipp to små triangler (omtrent 0,5 cm dype) midt på hver langsida av bandasjen.



7. Legg den ene delen av bandasjen under fingeren, slik at fingertuppen er ved kuttene, og brett bandasjen over fingertuppen.



Tips: Du kan klippe remsene kortere for kortere fingre.



8. Bruk Mepilex Ag 10 x 10 cm for å dekke tommelen.



9. Hold ett av hjørnene på bandasjen mot deg og klipp av to sider.



10. Klipp ytterligere ett av de gjenværende avrundede hjørnene slik at det blir tre rette kanter.



11. Rull bandasjen rundt tommelen for å dekke den til.



Sortimentsoversikt

Mepilex® Ag

En antimikrobiell skumbandasje for lite til moderat væskende brannså. Den absorberer sårveske og opprettholder et fuktig sårmiljø. Den gir rask (innen 30 minutter), vedvarende og bred antimikrobiell effekt i opptil 7 dager (in vitro).

| Art. nr. | Størrelse i cm | Antall pr. eske | Antall pr. kartong |
|----------|----------------|-----------------|--------------------|
| 287110 | 10 x 10 | 5 | 70 |
| 287210 | 10 x 20 | 5 | 45 |
| 287310 | 15 x 15 | 5 | 25 |
| 287410 | 20 x 20 | 5 | 20 |
| 287510 | 20 x 50 | 2 | 12 |



Tubifast®

En 2-way stretch tubulær bandasje for fiksering og beskyttelse av huden på alle deler av kroppen. Strekk i både lengden og bredden gir fri bevegelse.

| Art. nr. | Produkt/kroppsdeler | Bredde x lengde | Omkrets |
|----------|---|-----------------|-------------|
| 2434 | RØD – Små kroppsdeler | 3,5 cm x 10 m | 9 – 18 cm |
| 2436 | GRØNN – Små og mellomstore kroppsdeler | 5 cm x 10 m | 14 – 24 cm |
| 2438 | BLÅ – Store kroppsdeler | 7,5 cm x 10 m | 24 – 40 cm |
| 2440 | GUL – Ekstra store kroppsdeler, hoder og barnekropper | 10,75 cm x 10 m | 35 – 64 cm |
| 2444 | LILLA – Overkropp | 20 cm x 10 m | 64 – 130 cm |



Tubifast® garments

| Art. nr. | Produkt | Alder |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| 992007 | Trøye med integrerte votter | 6 – 24 måneder |
| 992008 | Trøye | 2 – 5 år |
| 992009 | | 5 – 8 år |
| 992010 | | 8 – 11 år |
| 992011 | | 11 – 14 år |
| 992012 | Strømpebukse | 6 – 24 måneder |
| 992013 | Leggings | 2 – 5 år |
| 992014 | | 5 – 8 år |
| 992015 | | 8 – 11 år |
| 992016 | | 11 – 14 år |
| 992017 | Sokker | 1 størrelse: 2 – 14 år |
| 5922 | Hansker | Barn XS |
| 5923 | | Barn Small |
| 5921 | | Barn Medium-Large/Voksen Small |
| 5920 | | Voksen Medium-Large |



Referanser:

1. Gee Kee EL, Kimble RM, Cuttle L, Khan A, Stockton KA. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns 2015; 41(5):946-955. 2. Silverstein P, Heimbach D, Meites H et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver containing soft silicone foam dressing (intervention) vs silver sulfadiazine cream. J Burn Care Res 2011; 32(6): 617-626. 3. Gee Kee EL, Stockton K, Kimble RM et al. Cost-effectiveness of silver dressings for paediatric partial thickness burns: An economic evaluation from a randomized controlled trial. Burns 2017; 43(4): 724-732. 4. Jaggawala S, Harris V, Roberts S et al. Treatment of partial thickness burns: a prospective, randomised controlled trial comparing Biobrane, Acticoat, Mepilex Ag and Aquacel Ag. J Burn Care Res 2020; 42(5): 934-43. 5. Tang H, Lv G, Fu J et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter investigation evaluating the efficacy and tolerability of Mepilex Ag versus silver sulfadiazine in the treatment of deep partial-thickness burn injuries. J Trauma Acute Care Surg 2015; 78(5): 1000-1007. 6. Nischwitz SP, Lutz H, Popp D, Winter R, Draschl A, Schellnegger M, Kargl L, Rappi T, Giretzlehner M, Kamolz LP. Global burn care and the ideal burn dressing reloaded—A survey of global experts. Burns 2021; 47: 1665-1674.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke, Mepilex og Tubifast er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2023 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NÖWC4372310



Kraften i det skånsomme



Mepilex® Ag
Appliseringsguide for
brannskader

Hvordan applisere på skulder

For denne appliseringen trenger du én Mepilex® Ag 10 x 20 cm bandasje.

Tips:
Alle applikasjonsteknikker som er vist i dette dokumentet er også overførbart til **Mepilex® Transfer Ag**.



1. Bruk en Mepilex Ag 10 x 20 cm.



2. Lag to små kutt som ikke ligger helt på linje (omtrent 1 cm lange) på hver side av bandasjen (se bildet).



3. Under påføringen av bandasjen, lag små overlappinger med kuttene. Dette vil gi større bevegelsesfrihet.



Hvordan applisere på albue og kne

For denne appliseringen trenger du en Mepilex® Ag 10 x 20 cm bandasje.



1. Bruk Mepilex Ag 10 x 20 cm.



2. Klipp ut to små triangler (omtrent 2 cm dype) midt på hver side av bandasjen.



3. Ved applisering av bandasjen, påse at kantene på kuttene legges inntil hverandre for å unngå lekkasje.



Hvordan applisere på hals og bryst

For denne appliseringen trenger du totalt tre bandasjer; to Mepilex® Ag 10 x 20 cm og én Mefix® 5 cm bred.


Steg 1: Applisering på hals



1. Bruk Mepilex Ag 10 x 20 cm.



2. Klipp bandasjen i to i lengderetningen.

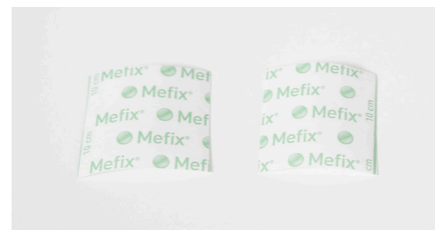

3. Klipp to biter av Mefix (omtrent 5 cm lange).



4. Start med å legge den ene delen av bandasjen nære ansiktet og deretter den andre kant i kant med den første.



5. Sikre de to bandasjene med en bit Mefix (omtrent 5 cm lang).

Steg 2: Applisering på bryst



1. Bruk Mepilex Ag 10 x 20 cm.



2. Klipp av den avrundede enden på bandasjen for å lage en rett kant.



4. Sikre bandasjedelene med en bit Mefix (omtrent 5 cm lang).



3. Legg den rette kanten inntil bandasjen som allerede er plassert på halsen. Forsikre at kantene ligger i kontakt med hverandre.

Hvordan applisere i ansikt


For denne appliseringen trenger du to Mepilex® Ag 10 x 20 cm bandasjer.



1. Bruk to Mepilex Ag 10 x 20 cm bandasjer.




2. Hver bandasje vil dekke én del av ansiktet.

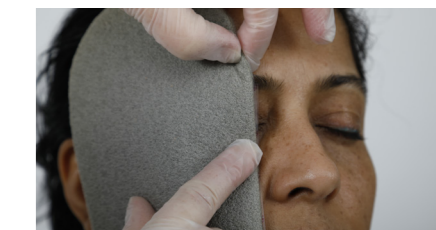

3. Identifiser hvor øyenbryn og nederste del av øyet befinner seg.



4. Klipp bort en sirkelformet del av bandasjen tilpasset øyet (lengde cirka som en pekefinger).

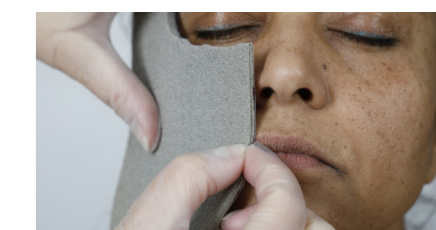

5. Identifiser hvor munnen befinner seg.



6. Klipp ut en liten triangel (omtrent 1 cm lang) for å lage plass til munnen.



7. Identifiser hvor nesevingen befinner seg.



8. Klipp ut tilstrekkelig plass til nesen.



9. Nå er bandasjen tilpasset den ene siden av ansiktet. Bruk dette som en mal for å klippe ut den andre bandasjen (speilvendt).



10. Bruk deler av bandasjen du har klippet vekk til å dekke nesen.

