


Melgisorb® Plus

Absorpčné alginátové krytie

Melgisorb® Plus je vysoko absorpčné krytie pre široké spektrum stredne a silne secernujúcich rán.

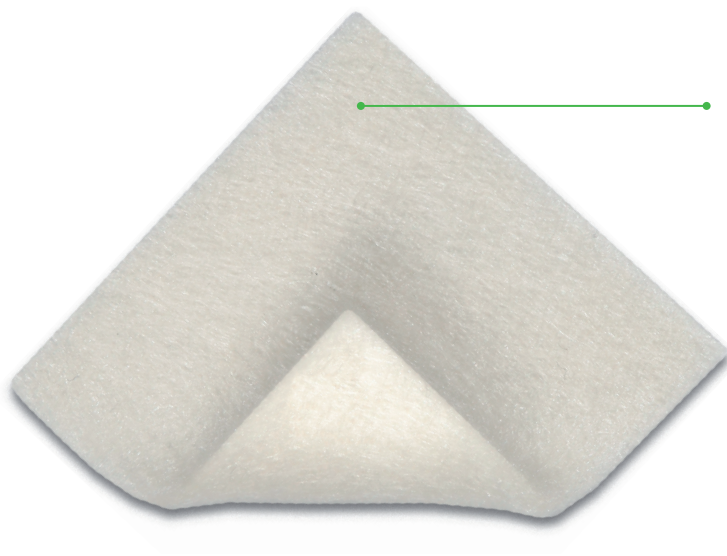


Hydrofilné alginátové vlákna


Mäkké sterilné krytie vyrobené z alginátových vlákien

- Vynikajúca absorpcia – pre silne secernujúce rany
- Vysoká pevnosť navlhko – umožňuje odstránenie v jednom kuse
- Vysoká schopnosť retencie tekutín – minimalizuje riziko macerácie

Ako používať Melgisorb® Plus:

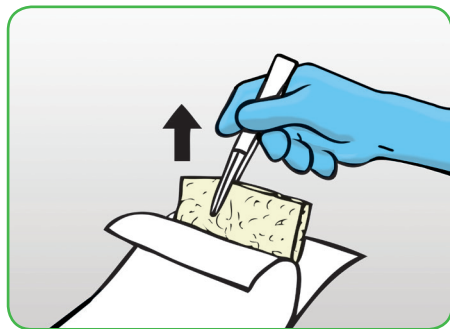


1. Vyberte vhodnú veľkosť Melgisorb® Plus (mierne väčšiu ako je veľkosť rany)

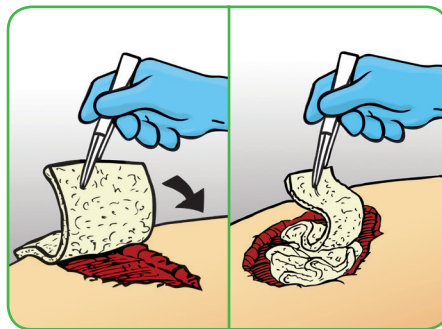

2. Priložte suchý Melgisorb® Plus na vlhkú spodinu rany.

Povrchové rany: Vyberte správnu veľkosť krytia, aby ste mohli prekryť celú plochu rany.

Hlboké rany a dutiny: Odstrihnite vhodný kus krytia určeného do dutín a voľne vyplňte ranu.

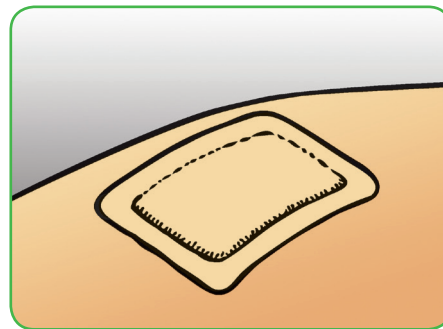

3. Zakryte a zaistite Melgisorb® Plus vhodným sekundárnym krytím, napríklad Mepilex® Border

Je možné použiť aj kompresnú terapiu.

Ako Melgisorb® Plus funguje

Melgisorb® Plus absorbuje veľké množstvo exsudátu. Po jeho absorbovaní sa alginátové vlákna zmenia na mäkký gél, ktorý zaisťuje vlhké prostredie rany. Gél je potom možné vypláchnuť fyziologickým roztokom.

Výhody Melgisorb® Plus

- Vysoká absorpcia
- Po zmene na gél neprilne do lôžka rany
- Vhodný do hlbokých rán a fistulí
- Pri styku s exsudátom tvorí gél
- Mäkký/ohybný/komfortný
- Môže byť zastrihnutý do požadovaného tvaru
- Nedráždi

Upozornenie

Melgisorb® Plus nie je určený na suché rany, popáleniny III. stupňa, alebo chirurgické implantáty.

V prípade príznakov infekcie postupujte v súlade s miestnymi doporučeniami

V prípade opakovaného použitia môžu byť vlastnosti výrobku zhoršené, prípadne hrozí riziko kontaminácie.

Doporučené použitie

Melgisorb® Plus je doporučený pre široké spektrum stredne a silne secernujúcich rán ako sú:

- Dekubity
- Vredy predkolenia
- Diabetické ulcerácie
- Odberové plochy
- Pooperačné rany
- Kožné lézie a ďalšie traumatické rany

K dispozícii na povrchové ako aj hlboké rany.

Prehľad veľkostí Melgisorb® Plus

Číslo výrobku	Veľkosť v cm	Kusov v balení	Kusov v kartóne
252000	5 x 5	10	100
252200	10 x 10	10	100
252500	10 x 20	10	100
253500	3 x 45	5	50



Viac na www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Tel: +420 221 890 517.

The Mölnlycke Health Care, Mepilex® Border symbol a názov sú registrované obchodné značky spoločnosti Mölnlycke Health Care.

