




Samolepiace mäkké silikónové krytie určené na ošetrovanie jaziev

- Dodatočná fixácia nie je potrebná
- Dobre sa prispôsobí tvaru tela
- Možné nosenie pri každodenných činnostiach

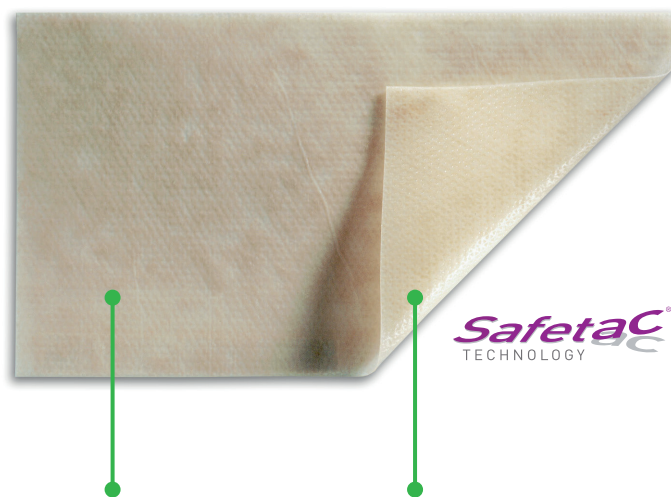

Horná vrstva tvorená filmom/
netkaným materiálom

- Priedušná
- Vodeodolná

Vrstva Safetac® (mäkký silikón)


- Pri snímaní krytia nedochádza k traumatizácii rany ani okolitej kože

Technológia Safetac®


Technológia Safetac®. Menej bolesti a menej traumatizácie.

Safetac® je patentovaná adhezívna technológia, ktorá minimalizuje bolesť u pacienta a traumu v rane. Technológia Safetac je dostupný výhradne v krytiach Mepilex®, Mepitel® Mepiform® spoločnosti Mölnlycke Health Care.

Pre viac informácií navštívte www.molnlycke.com

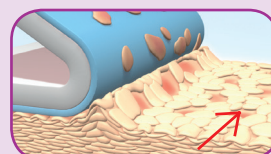


Tradičné lepidlo – dochádza k bolestivému strhávaniu kožných buniek

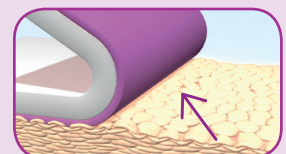


Technológia Safetac – nedochádza k žiadnemu strhávaniu kožných buniek

Ako funguje krytie Mepiform


Skúsenosti s lokálne používaným silikónom ukazujú, že priaznivo vplýva na jazvy a keloidy.¹ Zlepšenie stavu starej jazvy si môže vyžadovať 3 mesiace až jeden rok v závislosti od stavu tkaniva jazvy. V ideálnom prípade by sa malo krytie Mepiform nosiť 24 hodín denne. Doporučujeme krytie Mepiform snímať raz denne, napríklad pri sprchovaní, alebo kúpaní, skontrolovať kožu a umyť ju. Krytie Mepiform je možné použiť ako prevenciu vzniku jaziev – v takomto prípade by sa malo nosiť 2 – 6 mesiacov v závislosti od stavu jazvy.

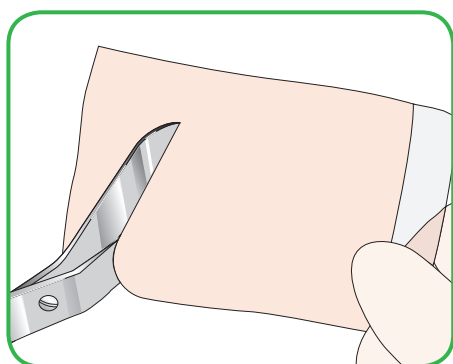

Odstráňte ochrannú fóliu.

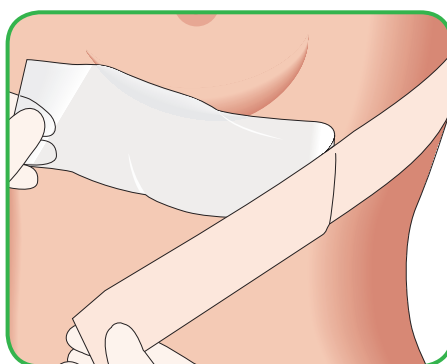

V prípade potreby zastrihnite krytie do požadovaného tvaru.

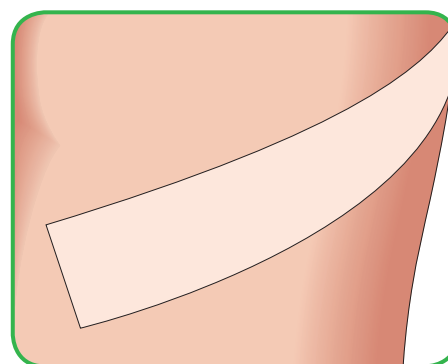

Pri pravidelnom dennom čistení jazvy znovu aplikujte krytie.

Výhody krytia Mepiform

- Nevyžaduje dodatočnú fixáciu
- Krytie Mepiform je tenké, pružné a diskrétné
- Môže sa nosiť pri každodenných činnostiach
- Umožňuje opakovanú aplikáciu
- Jeden kus krytia Mepiform je možné nosiť niekoľko dní

Poznámka

Ak došlo k macerácii kože, alebo sa objavila vyrážka, odstráňte krytie a počkajte, kým sa koža nezregeneruje a kým tieto príznaky nezmiznú. Potom postupne predlžujte dobu liečby. Krytie Mepiform poskytuje ochranu pred UV žiarením zodpovedajúcu faktoru 7,7.²

Referencie:

1. Quinn KJ (1987), Burns 13:33-40; Ahn ST et al (1991), Arch Surg 126:499-504; Dockery GL et al (1994), J Foot Ankle Surg 33:110-19; Katz BE (1995) Cutis 56:65-7; Carney SA et al (1994) Burns 20:163-7.
2. AS/NZS 4399:1996.



Prehľad veľkostí Mepiformu

ŠUKL kód	Číslo výrobku	Veľkosť v cm	Ks v balení	Ks v kartóne
A73121	293100	4x30	5	50
A73122	293200	5x7,5	5	25
A73123	293400	10x18	5	25

Sterilné, jednotlivo balené