


# Mepitel® Film

## Filmové krytie na ochranu kože


- Mepitel® Film je jemné, transparentné a priedušné krytie určené na ochranu pokožky. Môže sa použiť samostatne, alebo v kombinácii s inými výrobkami.
- Mepitel® Film minimalizuje bolesť a traumu pri prevážoch<sup>1,2,3,4,5,6</sup>
- Aplikačný systém Mepitel Film je pre maximálne jednoduché použitie.

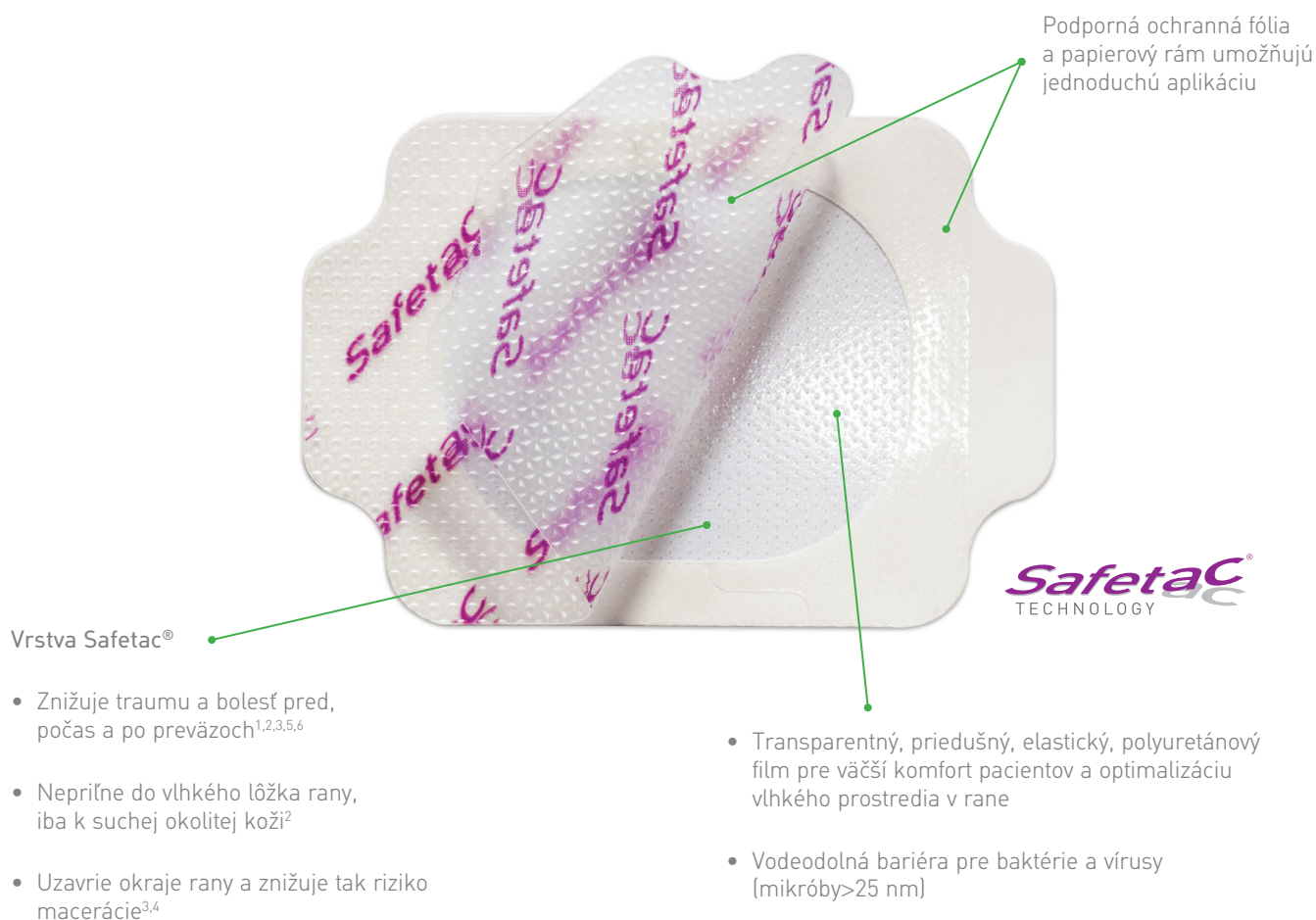


### Safetac® technológia

Safetac® je unikátna patentovaná adhezívna technológia minimalizujúca bolesť pacientov a traumu v rane. Technológia Safetac je dostupná výlučne u krytí spoločnosti Mölnlycke Health Care, vrátane Mepilex Border, Mepilex, Mepitel a Mepiform.

Pre viac informácií navštívte na [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

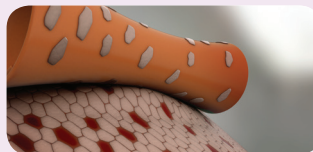

Tradičné lepidlo – dochádza k bolestivému strhávaniu kožných buniek.

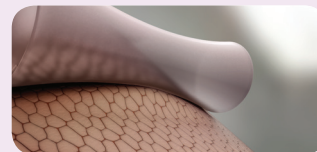

Safetac jemne priľne k pokožke a uzavrie okraje rany.

## Ako používať Mepitel® Film:



Dôkladne osušte kožu.

Odstráňte ochrannú fóliu (s potlačou Safetac®), tak aby sa odkryla adhezívna strana.



Umiestnite krytie na zvolené miesto. Mepitel® Film je možné upravovať/premiesťovať tak dlho, kým je papierový rám neporušený. Potom odstráňte papierový rám. Pri aplikácii krytie nenapínajte.

Kvôli dosiahnutiu lepších výsledkov a bezpečnej fixácii, aplikujte Mepitel® Film s presahom aspoň 1-2 cm na okolitú pokožku pri veľkostiach do 10x12 cm a s presahom 5 cm pri väčších veľkostiach.



Krytie na koži dôkladne vyhladte, Mepitel® Film je možné odstrániť bez toho, aby došlo k bolestivému strhávaniu kožných buniek.

## Ako Mepitel® Film funguje

Mepitel® Film poskytuje flexibilné, transparentné krytie kože a rany a poskytuje ochranu pred bakteriálnou, alebo inou kontamináciou, prienikom tekutín a zároveň sa prispôbuje všetkým tvarom a nepravidlostiam tela. Mepitel® Film udržiava vlhké prostredie v rane. Napriek tomu umožňuje odvádzanie vodných pár a prebytočnej vlhkosti z pokožky. Vďaka vrstve Safetac® tiež zabezpečuje atraumatické a bezbolestné preväzy. Mepitel® Film pri odstraňovaní nezanecháva zvyšky a úroveň adhézie zostáva v priebehu času rovnaká a nezvyšuje sa.

## Výhody

- Minimalizuje bolesť a traumu rany
- Znižuje riziko poškodenia novo vytvorenej pokožky
- Transparentný pre jednoduchú kontrolu
- Veľmi dobre sa prispôbuje tvarom tela a zabezpečuje pacientom komfort počas nosenia
- Bariéra pre baktérie a vírusy (väčšie ako 25 nm)
- Veľmi nízky potenciál podráždenia pokožky a alergie
- Nezanecháva zvyšky
- Vodeodolný

## Oblasti použitia

Mepitel® Film je určený na širokú škálu povrchových rán, ako sú dekubity I. a II. stupňa, povrchové popáleniny a odreniny. Chráni krehkú a citlivú pokožku. Mepitel® Film je možné použiť ako ochranný kryt pri otvorených brušných operáciách. Fixuje primárne krytie ako sekundárna fixácia a môže sa používať v kombinácií s gélnymi a emolienkami.

Prehľad veľkostí Mepitel® Film

Číslo výrobu	Veľkosť v cm	Kusov v balení	Kusov v kartóne
296170	6 x 7	10	50
296270	10 x 12	10	70
296470	10 x 25	10	50
296670	15 x 20	10	70

REFERENCE: **1.** White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008. **2.** White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005. **3.** Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Ostomy Wound Management 2003. **4.** Wiberg AB et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster publication. WUWH congress, Canada 2008. **5.** Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001. **6.** Waring M. et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.

www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3. Tel: +420 221 890 517. Názov a logo Mölnlycke Health Care, Safetac® a Mepitel® Film sú registrované ochranné známky Mölnlycke Health Care AB.

## Frekvencia výmeny

Mepitel® Film je možné nechať na rane niekoľko dní, v závislosti od stavu kože, alebo rany.

## Upozornenie

- Mepitel® Film nie je kontaktná vrstva na ranu a neumožňuje odvod exsudátu do sekundárneho krytia.
- V prípade použitia viacerých kusov a ich vzájomného prekryvania sa znižuje schopnosť odvádzania pár a môže dôjsť k zvýšeniu vlhkosti, ktorú nie je možné odvádzat.

## Varovanie

Mepitel® Film nemôže byť použitý na primárnu fixáciu kanýl, i.v. vstupov, infúzií a iných prístrojov zabezpečujúcich životné funkcie.

