

# Mepilex® Lite klippeguide - forebyggelse af tryksskader under medicinsk udstyr

Mepilex® Lite beskytter huden, absorberer fugt og har vist sig at beskytte skrøbelig hud fra eksterne påvirkninger, såsom friktion og tryk som følge af hyppig brug af medicinsk udstyr<sup>1,2</sup>.


Ansvarsfraskrivelse: Den profylaktiske anvendelse af bandager til at reducere risikoen for medicinsk udstyrsrelaterede tryksår er godt rapporteret. Men anvendelse under personlig beskyttelsesudstyr (PPE), med hensyn til opretholdelse af en forsegling og potentiel indvirkning på virusoverførelse, er ikke testet af Mölnlycke eller andre, så vidt vides.

- Mepilex Lite kan nemt klippes til i den ønskede form
- Når du klipper i Mepilex Lite, efterlad beskyttelsespapiret på
- Mepilex Lite giver blid vedhæftning til huden med Safetac® teknologi<sup>3</sup>



**Safetac**  
TECHNOLOGY

Illustrationer eksemplificerer områder til beskyttelse under medicinsk udstyr



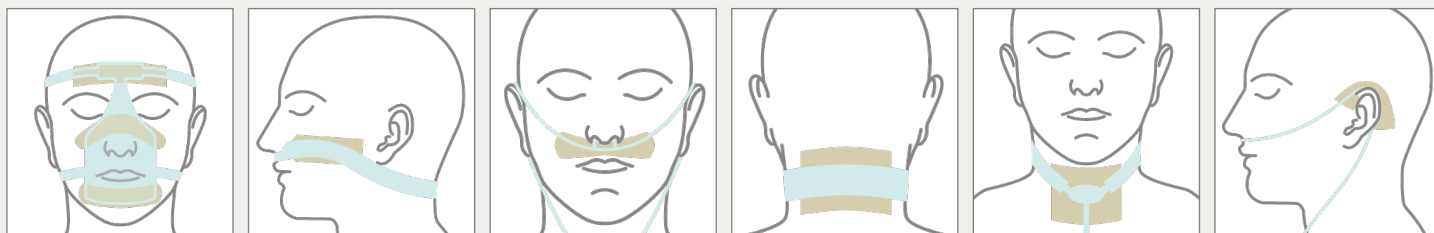


Mepilex® Lite

  
Mölnlycke®

# Klippevejledning

Vælg en bandagestørrelse som kan dække det berørte område og klip for at tilpasse omkring specifikke patientbehov/kropskonturer eller udstyrsformer. Applicér med den klæbende side mod såret.

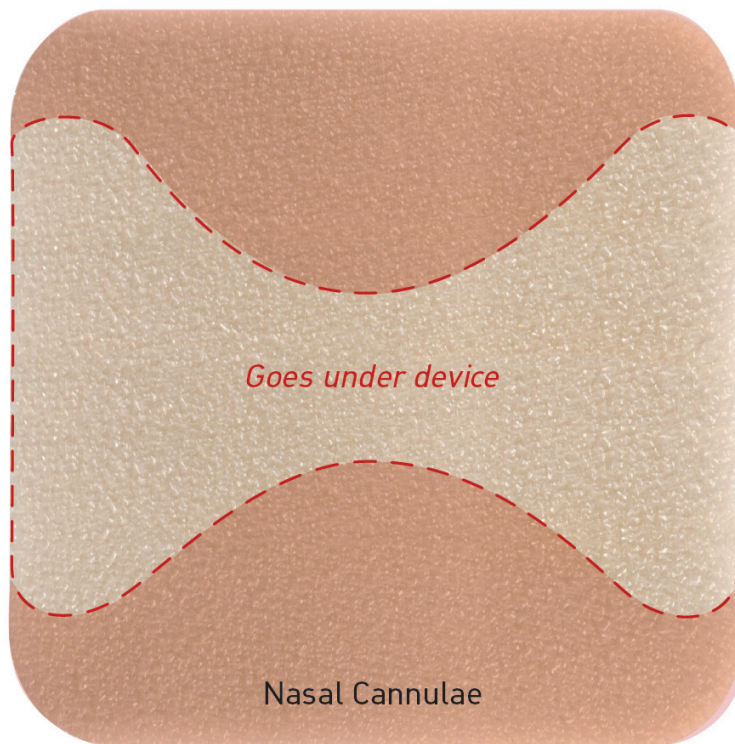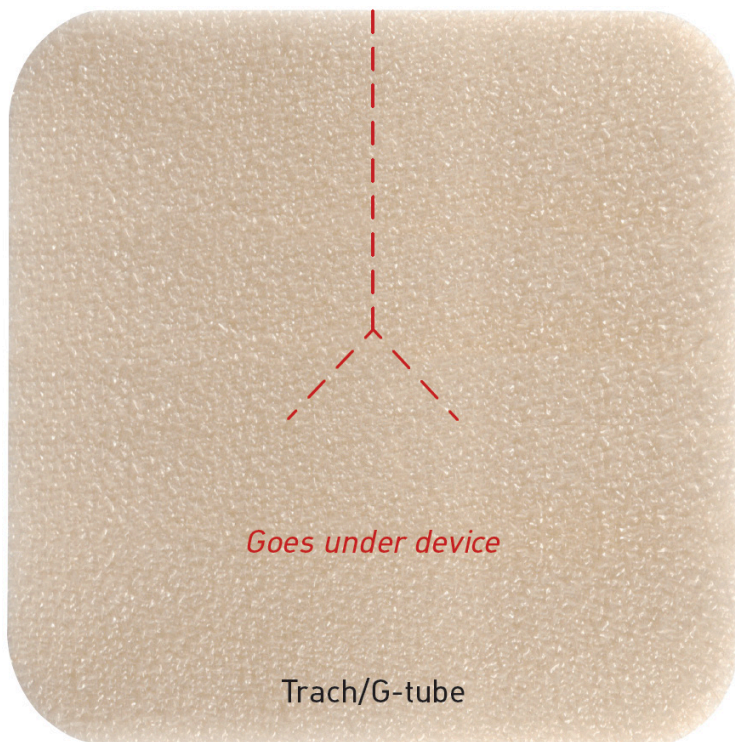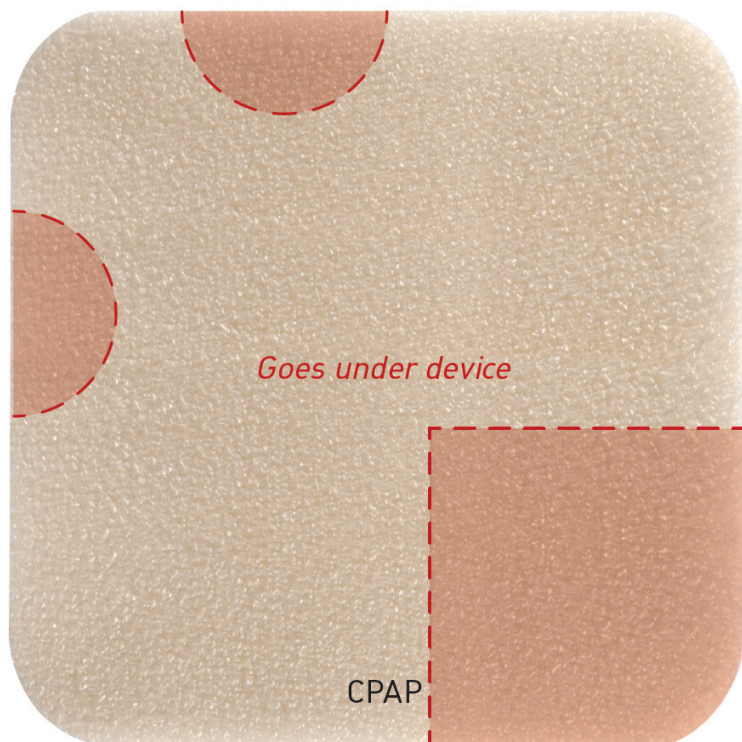

**SafetaC**  
TECHNOLOGY

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri skal ikke fortolkes som lægepraksis eller erstatte en uafhængig medicinsk vurdering af en patient udført af en kliniker. Denne information, inkluderet, men ikke begrænset til, forslag til produktets anvendelsestid, produktvalg og foreslået anvendelse er baseret på generaliseringer og tager ikke hensyn til de unikke egenskaber ved den enkelte sår. Hver patients kliniker forbliver eneansvarlig for at vurdere sværhedsgraden af patientens sår, bestemme den passende behandling og styre behandlingen af såret.

Referencer: 1. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792–e797. 2. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14. 3. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke, Mepilex og SafetaC varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care Gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0132004

  
**Mölnlycke**<sup>®</sup>