

# Melgisorb® Plus

Pansement d'alginate de calcium très absorbant


## Fibres d'alginate

### hydrophilique

- Absorption supérieure
- Grande résistance à l'humidité – permet le retrait en une pièce
- Forte capacité de rétention pour limiter la macération

## Doux et conforme

- S'applique et s'enlève facilement.

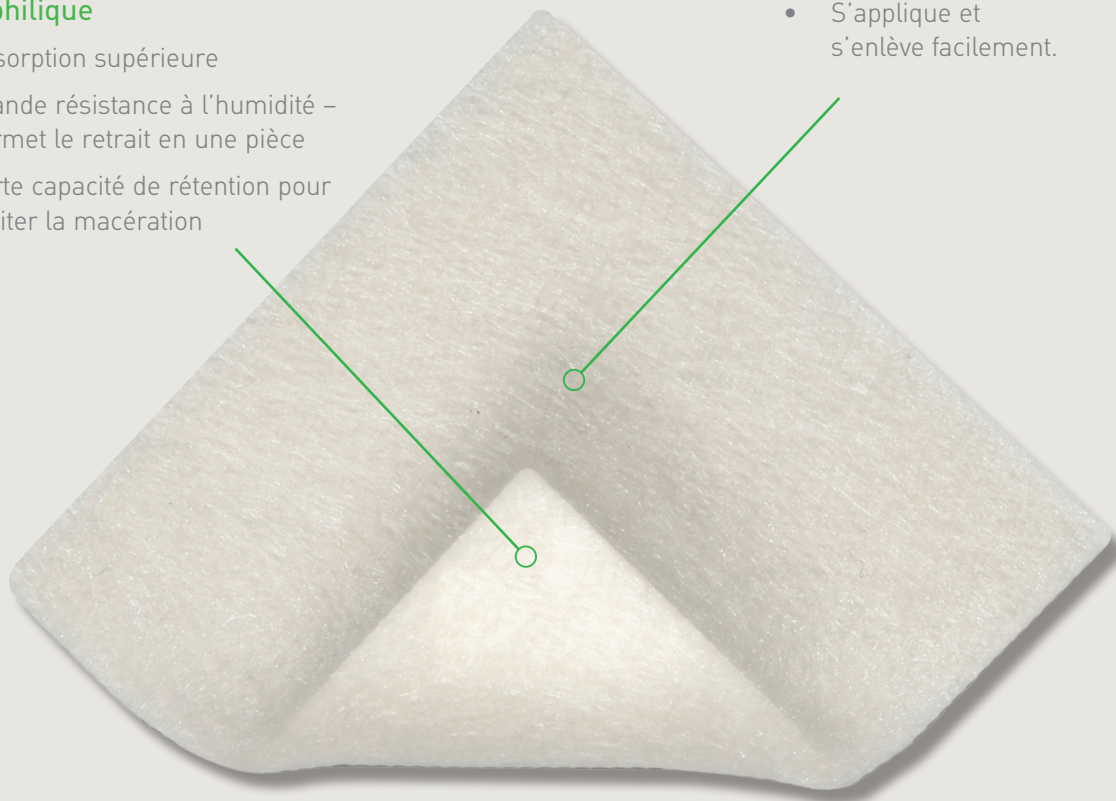

Performance optimisée avec absorption et rétention supérieure


- Conserve son intégrité avec puissant effect de blocage
- Maintient un équilibre d'humidité optimal de la plaie favorisant la guérison
- Réduit les risques de macération

- Grande résistance à l'humidité permet le retrait en une pièce
- Économique : Pansement optimisé avec absorption supérieure

Melgisorb® Plus


  
Mölnlycke®

## Mode d'emploi

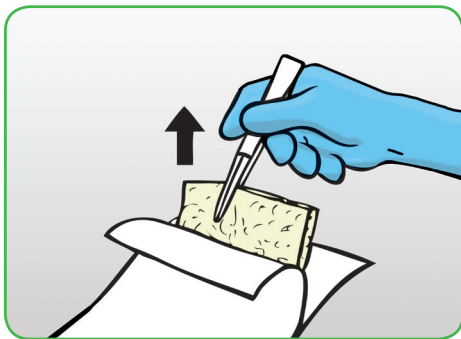

**1. Choisir une taille** de Melgisorb® Plus légèrement plus grande que la plaie. Ouvrir l'emballage en tirant.


Nettoyer la plaie et assécher la peau péri-lésionnelle.

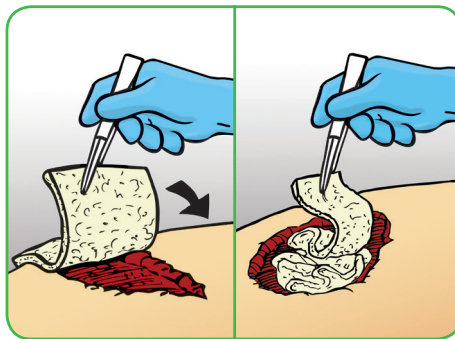

**2. Appliquer** une couche sèche de Melgisorb® Plus sur la plaie humide.

**Plaies superficielles :** Choisir le format approprié de pansement plat pour recouvrir toute la plaie.

**Plaies profondes :** Découper la longueur appropriée de pansement pour plaie profonde et appliquer librement dans la plaie.

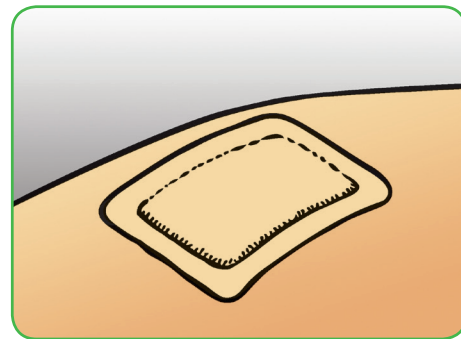

**3. Recouvrir et fixer en place** Melgisorb® Plus

Plus à l'aide d'un pansement secondaire approprié comme Meplix® Border.

On peut utiliser un bandage de compression avec Melgisorb® Plus.

## Mode d'action de Melgisorb® Plus

Les fibres d'alginate hydrophilique de Melgisorb® Plus absorbent de grandes quantités d'exsudat de la plaie et forme un gel doux et humide. Le gel favorise l'humidité de la plaie et bloque les fuites latérales de l'exsudat afin de réduire le risque de macération. Le gel doux n'adhère pas à la plaie et réduit le traumatisme et la douleur pendant le port et lors des changements de pansement. Le gel s'enlève facilement en irrigant avec une solution saline normale.

## Avantages de Melgisorb® Plus

- N'adhère pas aux plaies humides
- Convient aux plaies profondes
- Doux et confortable
- Peut être découpé au besoin
- Facile à retirer
- Économique : Idéal comme pansement secondaire pour améliorer la capacité d'absorption

## Indications\*

Melgisorb® Plus est indiqué dans le traitement de nombreuses plaies modérément à fortement exsudatives, telles que : les escarres, les ulcères veineux, artériels et diabétiques, les sites donneurs, les plaies post-opératoires, les plaies dermiques et plaies traumatiques.

## Sélection Melgisorb® Plus (emballage stérile)

No d'article	Format cm	Pcs/boîte	Pcs/caisse
252000	5 x 5	10	100
252200	10 x 10	10	100
252500	10 x 20	10	100
253500	3 x 45	5	50

\*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site [www.molnlycke.ca](http://www.molnlycke.ca)

## Précautions\*

Melgisorb® Plus n'est pas indiqué pour les plaies sèches, les brûlures du troisième degré ou les chirurgies prothétiques.

En cas de suspicion d'infection, suivre les procédures indiquées par les professionnels de santé.

Melgisorb Plus ne doit pas être utilisé sur les plaies fortement hémorragiques. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.

## Contre-indications\*

Melgisorb® Plus n'est pas indiqué pour les plaies sèches, les brûlures du troisième degré ou les implantations chirurgicales.

