

Leidraad voor drukletsels door medische hulpmiddelen – Mepilex[®] Lite

Mepilex[®] Lite beschermt de huid en absorbeert vocht. Bovendien is aangetoond dat het de kwetsbare huid beschermt tegen externe krachten, zoals wrijving en druk door veelvuldig gebruik van medische hulpmiddelen^{1,2}.


Disclaimer: Het profylactische gebruik van verbanden bij het verminderen van het risico op drukletsels in verband met medische hulpmiddelen is goed gedocumenteerd, maar het gebruik ervan onder persoonlijke beschermingsmiddelen voor wat betreft het behoud van de bescherming en de mogelijke invloed op virusoverdracht is niet getest door Mölnlycke of anderen, voor zover wij weten.

- Mepilex Lite kan gemakkelijk in de gewenste vorm worden geknipt
- Laat bij het knippen van Mepilex Lite de rugfilm op zijn plaats
- Mepilex Lite hecht zich zachtjes aan de huid met de Safetac[®] technologie³



Safetac
TECHNOLOGY

Illustraties tonen te beschermen gebieden onder medische hulpmiddelen




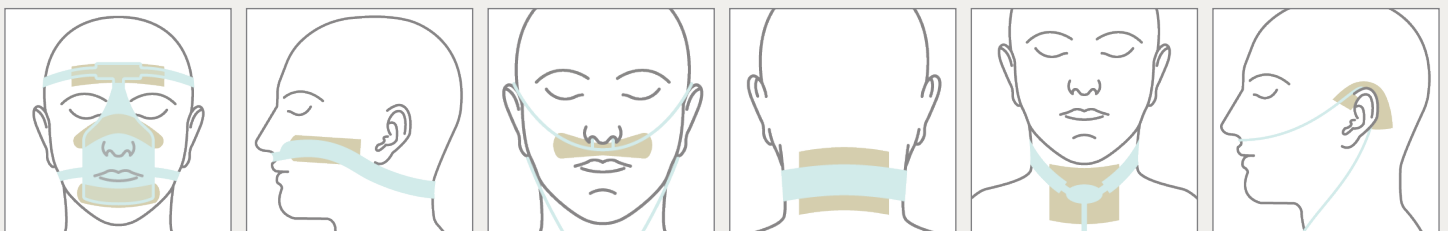


Mepilex[®] Lite


Mölnlycke[®]

Leidraad voor het knippen

Kies de geschikte verbandmaat om het beschadigde gebied te bedekken en knip het op maat van de unieke lichaamscontouren van de patiënt of de vormen van het hulpmiddel. Breng de klevende zijde op de huid aan.

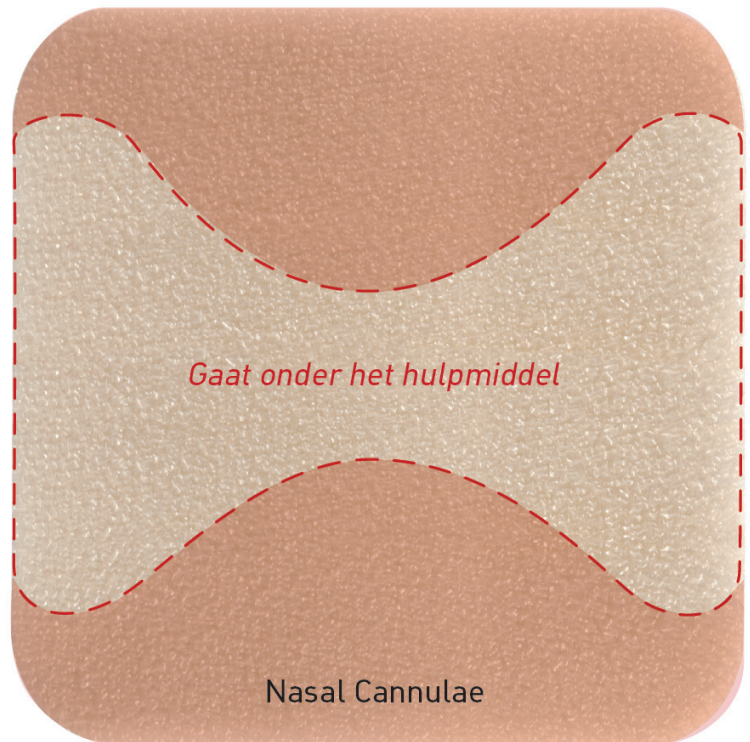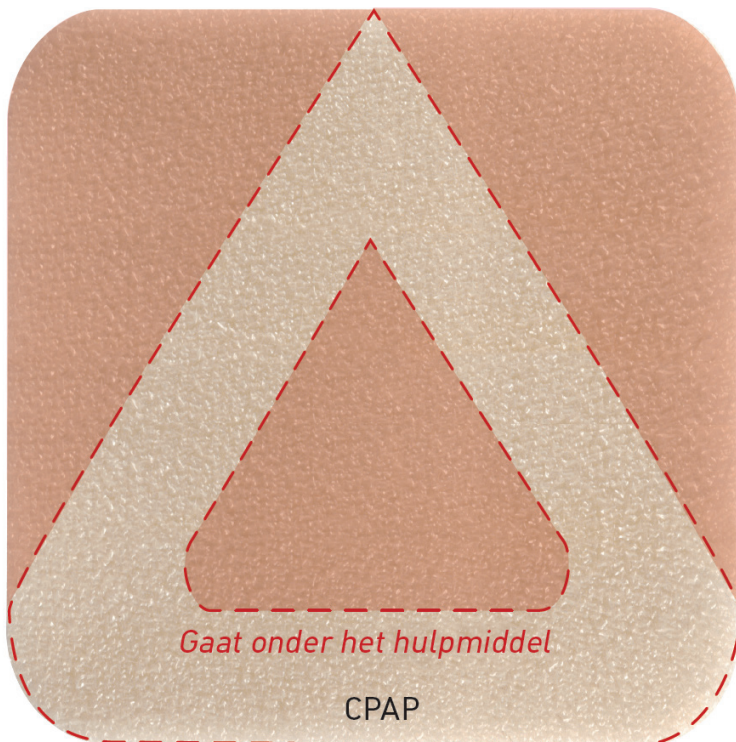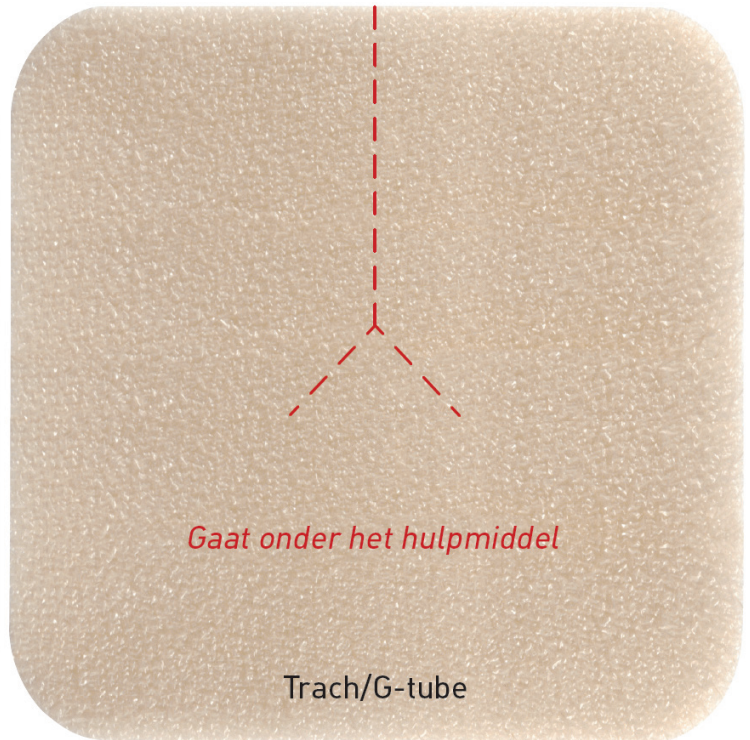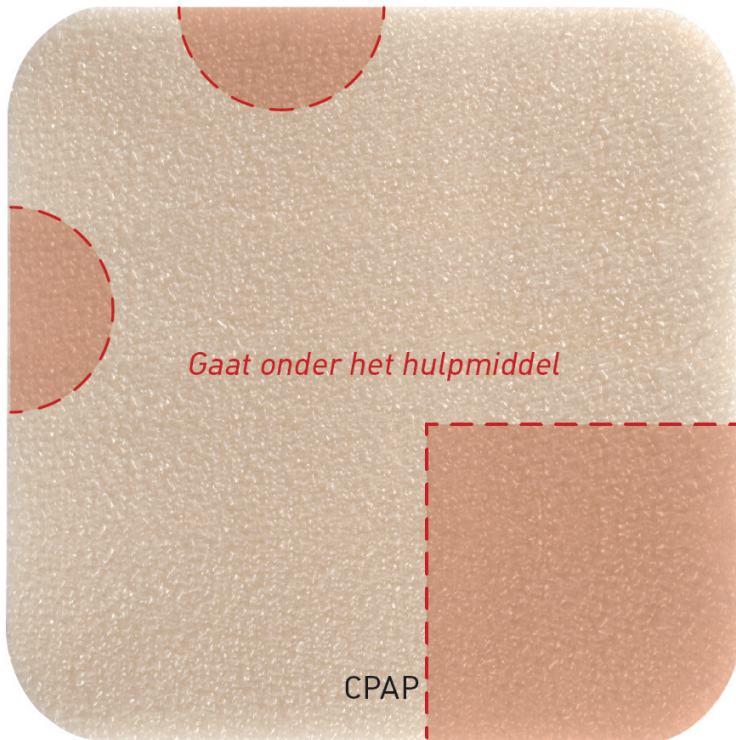

Disclaimer: De hierin verstrekte informatie mag niet worden opgevat als de gangbare geneeskundige praktijk en treedt niet in de plaats van het onafhankelijke medische oordeel van een behandelend arts. Deze informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot suggesties voor de draagtijd van het product, de productkeuze en het voorgestelde gebruik, is gebaseerd op veralgemeningen en houdt geen rekening met de unieke kenmerken van de wond van een individu. De behandelende arts van elke patiënt blijft als enige verantwoordelijk voor het beoordelen van de ernst van de wond, het bepalen van de juiste behandeling en het beheer van de behandeling van de wond.

Referenties: 1. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792–e797. 2. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14. 3. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22.

SafetaC
TECHNOLOGY

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Van Deventerlaan 31-51, NL - 3528 AG Utrecht, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52

De Mölnlycke, Mepilex en SafetaC naam, logo en merknaam zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
© 2020 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. NLWC00062004


Mölnlycke[®]