

Mepilex® Border Ag

Nákladovo efektívne antimikrobiálne absorpčné krytie

- Minimalizuje bolesť a traumu pri výmene krytia^{1,2,3}
- Rýchle a stále antimikrobiálne pôsobenie⁵
- Vynikajúca schopnosť zvládať tekutiny
- Netraumatizuje rany, ale bezpečne fixuje

Polyuretánový istiaci film

- Priedušný
- Vodeodolný
- Odolný voči vírusom a baktériám

Vrstva Safetac®

- Minimalizuje bolesť a traumu pred, počas a po výmene krytia¹
- Nepriľne k vlhkému lôžku rany, ale iba k suchej koži³
- Utesní okraje rany a minimalizuje riziko macerácie⁴

Viacvrstvý absorpčný penový vankúšik

- Stlačená pena s obsahom striebra, ktorá absorbuje a rovnomerne rozostrie exsudát po celom povrchu krytia a zároveň umožňuje uvoľňovanie striebra
- Vrstva vlákien umožňujúca maximálnu retenciu

Safetac
TECHNOLOGY

Rýchle a trvalé uvoľňovanie iónového striebra


- Antimikrobiálna aktivita už po 30 minútach až do 7 dní⁵

Technológia Safetac®


Technológia Safetac®. Menej bolesti a menej traumatizácie.

Safetac® je patentovaná adhezívna technológia, ktorá minimalizuje bolesť u pacienta a traumu v rane. Technológia Safetac je dostupný výhradne v krytiach Mepilex®, Mepitel® Mepiform® spoločnosti Mölnlycke Health Care.

Pre viac informácií navštívte www.molnlycke.com

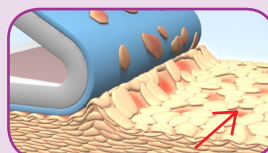


Tradičné lepidlo – dochádza k bolestivému strhávaniu kožných buniek

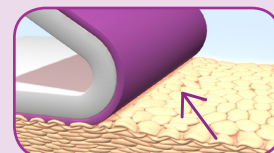


Technológia Safetac – nedochádza k žiadnemu strhávaniu kožných buniek

Ako použiť Mepilex® Border Ag

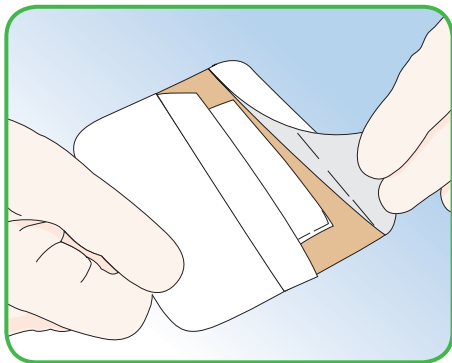

Vyčistite ranu.
Odstráňte ochrannú fóliu.

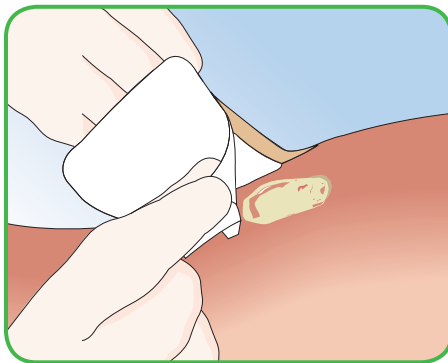

Priložte krytie prínavou stranou na ranu.
Nenafahujte.

Ako funguje krytie Mepilex Border Ag

Mepilex Border Ag je antimikrobiálne krytie „so všetkými vlastnosťami v jednom“, ktoré účinne absorbuje, udrží exsudát a zároveň zaisťuje vlhké prostredie v rane. Vrstva Safetac utesní okraje rany, bráni presakovaniu exsudátu do okolitej kože a tým minimalizuje riziko macerácie. Vrstva Safetac zaisťuje, aby pri snímaní krytia nedochádzalo k poškodzovaniu rany a okolitej kože a pacient tak nebol vystavený ďalšej bolesti.

Mepilex Border Ag do 30 minút deaktivuje patogény vyskytujúce sa v rane a jeho účinok trvá až 7 dní. Skutočnosť, že Mepilex Border Ag znižuje počet mikroorganizmov, môže tiež obmedziť zápach.

Výhody krytia Mepilex Border Ag

- Minimalizuje bolesť a traumu počas preväzu
- Samolepiaci, sekundárna fixácia nie je potrebná
- Vodeodolný
- Možné použitie pod kompresnými obväzmi
- Zvyšuje pohodlie pacienta pri nosení
- V závislosti od stravy rany, môže zostať na rane až niekoľko dní
- Krytie je možné nadvihnúť a prispôbiť jeho polohu bez straty lepiacej schopnosti
- Nízka pravdepodobnosť vzniku podráždenia kože a alergie




Oblasť použitia

Mepilex Border Ag bol vyvinutý na ošetrovanie celého radu stredne až vysoko eksudujúcich rán, ako sú napríklad vredy predkolenia, vredy na chodidlách, dekubity a malígne rany, popáleniny druhého stupňa, traumatické rany a operačné rany, kde je indikované vlhké prostredie, zvládanie exsudátu, jemná fixácia a antimikrobiálne prostredie.

Upozornenie

- Nepoužívajte pri pacientoch s dokázanou citlivosťou na striebro
- Nepoužívajte Mepilex Border Ag počas liečby ožarovaním, alebo pri niektorých vyšetreniach, napríklad röntgenom, či ultrazvukom, pri diatermii, alebo počas magnetickej rezonancie.
- Mepilex Border Ag nepoužívajte zároveň s oxidačnými činidlami, napríklad s roztokmi chlórnanov alebo peroxidom vodíka.

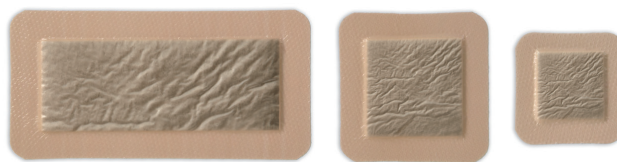

Prehľad veľkostí Mepilex BORDER AG

| ŠUKL kód | Číslo výrobu | Veľkosť v cm | Ks v balení | Ks v kartóne |
|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| A88255 | 395010 | 12,5 x 12,5 | 5 | 50 |
| A88257 | 395410 | 17,5 x 17,5 | 5 | 40 |

sterilne balené