



# Mölnlycke® Laparoskopisk suge- og skyllesæt

Truly customised laparoscopic solutions

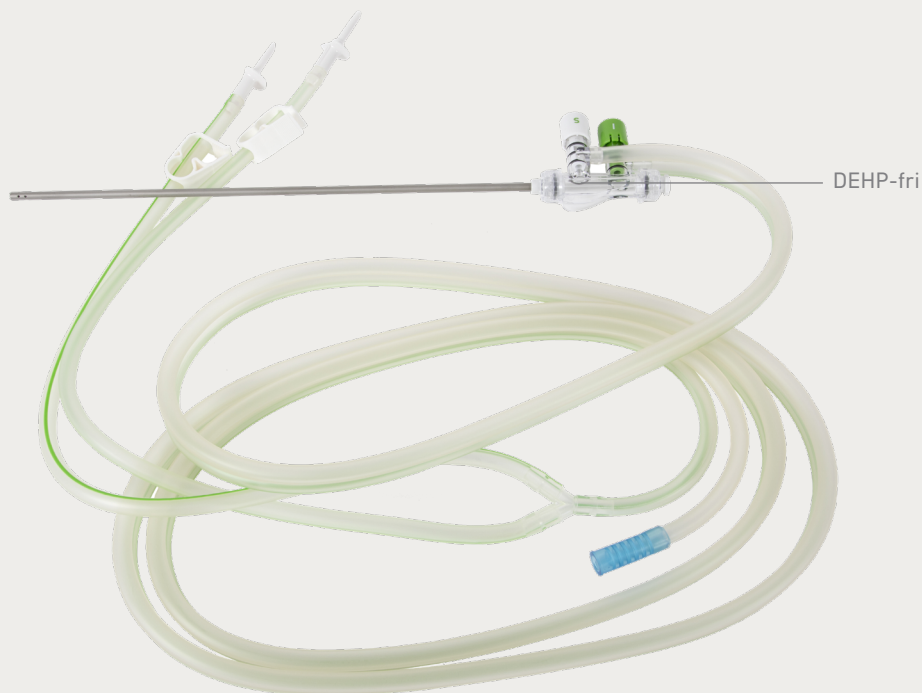

Laparoskopisk suge- og skyllesæt er udviklet for at muliggøre aspiration og/eller irrigation under laparoskopiske indgreb. Det hjælper også med at holde bughulen fri for væske og blod.

- Håndstykket kan betjenes med begge hænder
- Gennemsigtigt håndstykke giver uhindret visualisering
- Envejsventil forhindrer saltvand i at løbe tilbage
- Blød DEHP-fri slange med lavt drejemoment og easy-peel adskillelse
- Fås i to længder – 33cm og 45cm
- Slange med to spidser
- Farve- og bogstavkodede knapper til tydelig identifikation af suge- og skyllefunktioner
- Proksimal irrigation tillader gennemskylning ved blokade
- Kompatibel med Mölnlycke® 10mm suge- og skyllerør
- Matteredt skaft minimerer blanding med koldt lys
- Distale, laterale huller og en atraumatisk spids for at forebygge beskadigelse af kropsvæv
- Fås både som sterilt, enkeltpakket produkter og til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker

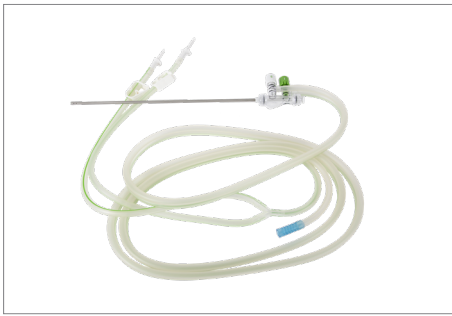

Suge- og skyllesæt



Suge- og skyllesæt, håndstykke



Suge- og skyllesæt, rør



## Bestillingsinformation

Varenr.	Beskrivelse	Str.	Længde	Inderæske/trp.
899107	Suge- og skyllesæt med to spidser	5mm	33cm	10/20
899108	Suge- og skyllesæt med to spidser	5mm	45cm	10/20
899109	Rør til suge- og skyllesæt	10mm	33cm	10/20
899113	Rør til suge- og skyllesæt	5mm	45cm	10/20

Lovlig producent: Unimax Medical Systems Inc.  
Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.  
© 2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0372310

  
**Mölnlycke**<sup>®</sup>