


Saug-/Spülsystem

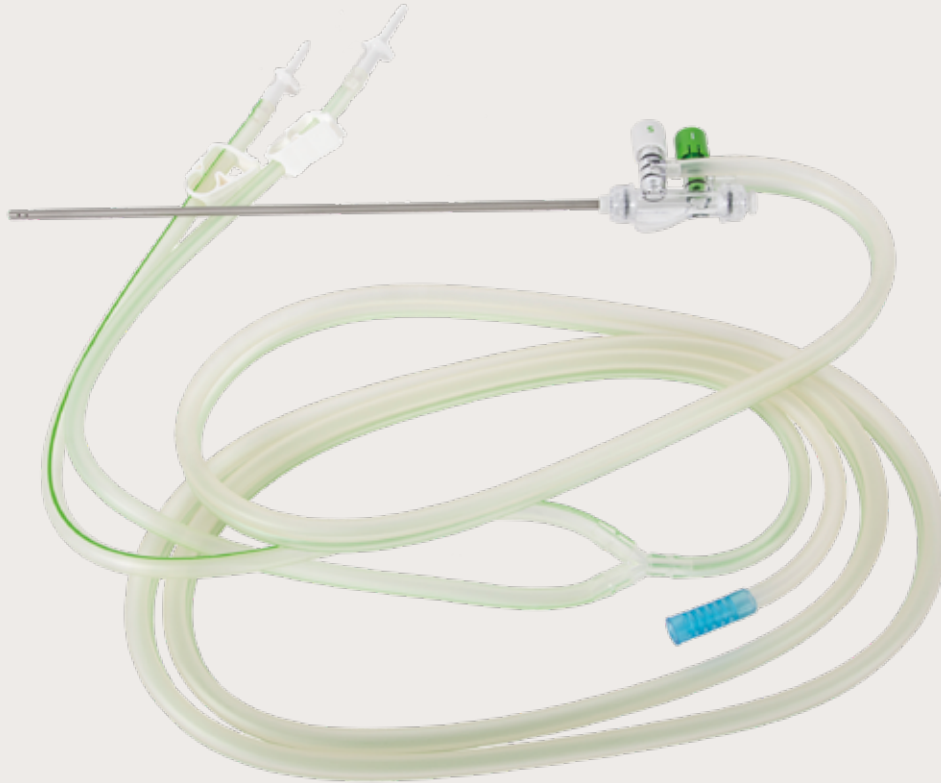

CE 0197  **STERILEEO**

Das Saug- und Spülsystem ist ein steriles Einweginstrument, das zwei Funktionen kombiniert: Absaugen und Spülen. Das Instrument besteht aus einem Saug- und Spülschlauch, einem Handstück und einem Saugeransatz. Zusätzlich erhältlich ist ein größerer Saugeransatz mit 10 mm Durchmesser, falls eine erhöhte Saug- und Spülkapazität erforderlich ist.

- Ergonomisches Handstück kann sowohl mit der linken als auch der rechten Hand bedient werden
- Transparentes Handstück zur Visualisierung
- Einweg-Ventil verhindert das Zurückfließen von Kochsalzlösung
- Weicher und drehmomentarmer DEHP-freier Schlauch mit leicht lösbarer Verbindung
- Doppeldorn-Schlauch für höchste Flexibilität
- Tasten mit Buchstaben- und Farbkodierung für eindeutige Identifikation der Funktionen
- Kompatibel mit 10-mm-Saugsonde
- Matter Schaft eliminiert Blendung durch Kaltlicht
- Distale seitliche Öffnungen und atraumatische Spitze verhindern Beschädigungen des Körpergewebes



Handstück



Doppeldorn



Y-Konnektor

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	IV / VSK
899107	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn	5 mm	33 cm	10 / 20
899108	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn	5 mm	45 cm	10 / 20
899109	Saug-/Spülansatz	10 mm	33 cm	10 / 100

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

Allgemeine Informationen

Sterilisation: Ethylenoxid

Haltbarkeit: Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

Verpackung: Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

Material: DEHP- und Latexfrei.

Entsorgung: Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

Hersteller: Unimax Medical Systems Inc.;
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com