


Kit d'aspiration et d'irrigation Mölnlycke®


Solutions de cœlioscopie personnalisées

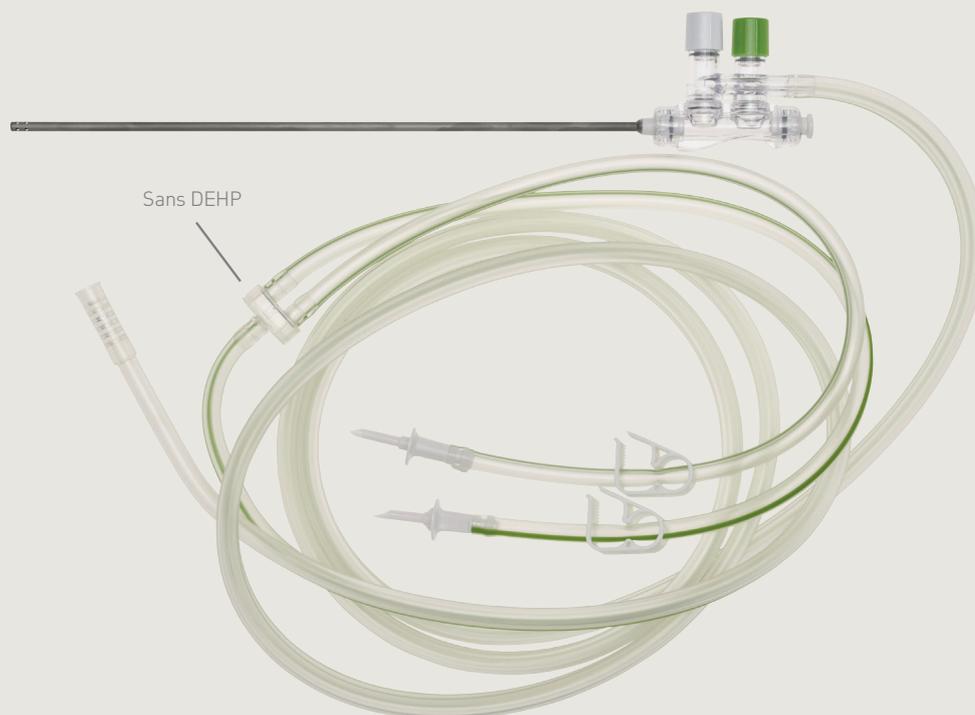

Le kit d'aspiration et d'irrigation est conçu pour permettre une aspiration et/ou irrigation efficace(s) et aisée(s) pendant les interventions de cœlioscopie. Il contribue à éliminer les liquides et le sang dans la cavité abdominale, pour une intervention sûre et efficace.

- Conception ergonomique. La poignée peut être manipulée avec chaque main
- Poignée transparente pour une visibilité inaltérée
- Valve anti-retour pour éviter le reflux de solution saline
- Tubes flexibles sans DEHP pouvant être facilement découplés
- Disponible en deux longueurs – 33cm et 45cm
- Tubes à double pointe pour une flexibilité optimale
- Boutons avec code de couleurs et de lettres pour une identification aisée des fonctions
- Irrigation près du centre pour rincer les engorgements
- Joint près du centre permettant l'insertion d'instruments de 3mm et évitant les fuites de CO₂ / liquide
- Manche mat évitant les reflets de lumière froide
- Trous latéraux distaux et tête atraumatique pour éviter d'endommager les tissus

Disponible en emballage individuel stérile ou en tant que composant de trousse composite Mölnlycke®.

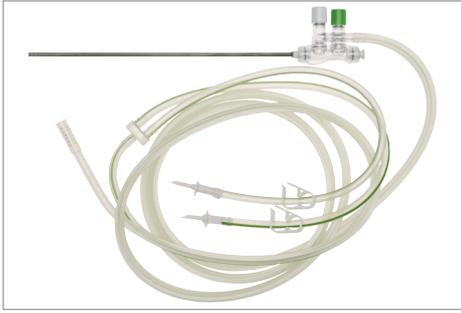

Aspiration et irrigation



Aspiration et irrigation – pièce à main

N° de réf.	Description	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899107	Kit d'aspiration et d'irrigation double pointe	5mm	33cm	10
899108	Kit d'aspiration et d'irrigation double pointe	5mm	45cm	10
899109	Sonde d'aspiration	10mm	33cm	10

Tous les kits d'aspiration et d'irrigation sont fabriqués avec des tubes sans DEHP.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00581709)