


Laparoskopisk sett for sug og spyl

Laparoskopisk sett for sug og spyl er designet for effektiv og enkel aspirasjon og/eller irrigasjon under laparoskopiske prosedyrer. Det bidrar til å holde bukhulen fri for væsker og blod, og sørger for ett sikkert og effektivt kirurgisk inngrep.

- Ergonomisk design. Håndstykket kan betjenes med enten venstre eller høyre hånd
 - Gjennomsiktig håndstykke for god visuell kontroll
 - Enveisventil hindrer reflux av saltløsning
 - Myk, DEHP-fri slange med lav "easy-peel"-separering
 - Finnes i to lengder – 33 cm og 45 cm
 - Slange med dobbel spiss for større fleksibilitet
 - Farge- og bokstavkodete knapper for tydelig identifisering av funksjon
 - Proksimal irrigasjon muliggjør bortskylling av blokkeringer
 - Proksimal lukking muliggjør innføring av 3 mm instrumenter og hindrer lekkasje av CO₂/væske
 - Kompatibel med 10 mm sugesonde
 - Matt skaft eliminerer refleksjon av kaldlys
 - Distale, laterale hull og en atraumatisk tupp for å hindre skade på kroppsvev
- Tilgjengelig både som sterile, enkeltpakkede produkter og for bruk i ProcedurePak®-prosedyrepakker

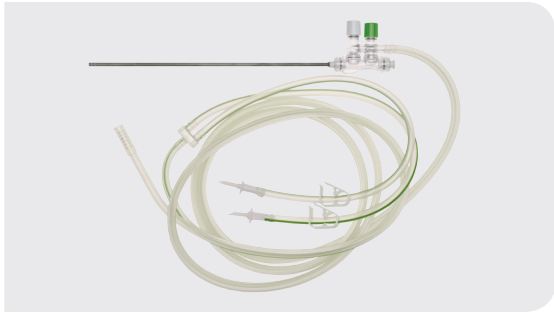

Sug og spyl.



Sug og spyl - håndstykke.

Art. Nr.	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Eske/krt.
899107	Sett for sug og spyl, med dobbel spiss	5 mm	33 cm	10/20
899108	Sett for sug og spyl, med dobbel spiss	5 mm	45 cm	10/20

Alle sett for sug og spyl er fremstilt med DEHP-frie slanger.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Nore. Tlf. + 47 22 70 63 70.
Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke Health Care og ProcedurePak® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2016. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. HQSU0103