


Mölnlycke® laparoscopisch zuig- en irrigatiesysteem


Laparoscopische oplossingen op maat

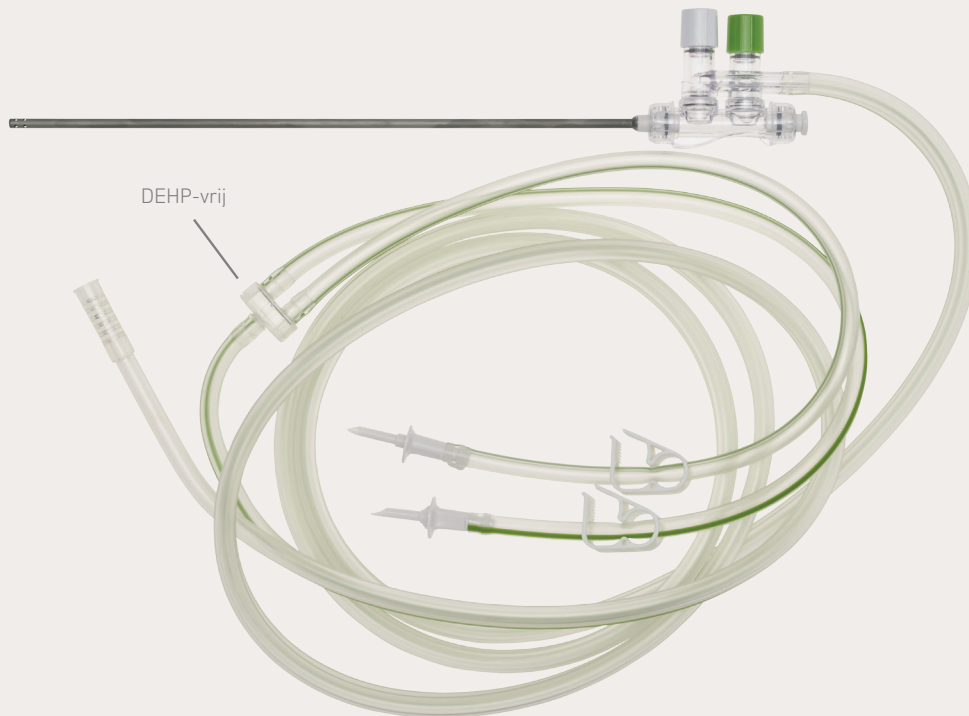

De laparoscopische zuig- en irrigatieset is ontworpen voor een efficiënte en gemakkelijke aspiratie en/of irrigatie tijdens laparoscopische ingrepen. De buikholte blijft gevrijwaard van vocht en bloed, zodat de chirurgische ingreep veilig en efficiënt kan verlopen.

- Ergonomisch ontwerp. Het handstuk kan worden gebruikt met beide handen
- Transparant handstuk voor onbelemmerd zicht
- Eenrichtingsklep voorkomt dat er spoelvoestof terugloopt
- Zachte DEHP-vrije slangen, gemakkelijk te scheiden
- Verkrijgbaar in twee lengten - 33cm en 45cm
- Slangen met dubbele spike voor maximale flexibiliteit
- Kleur- en lettergecodeerde knoppen voor duidelijke herkenning van de functies
- Proximale irrigatie voor het doorspoelen van verstoppingen
- Proximale afdichting biedt de kans om instrumenten van 3mm in te brengen en voorkomt CO²-/vloeistoflekage
- Matte schacht die lichtweerskaatsing tegengaat
- Distale laterale openingen en atraumatische punt om schade aan lichaamsweefsel te voorkomen

Verkrijgbaar als individueel verpakt steriel product en als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays.

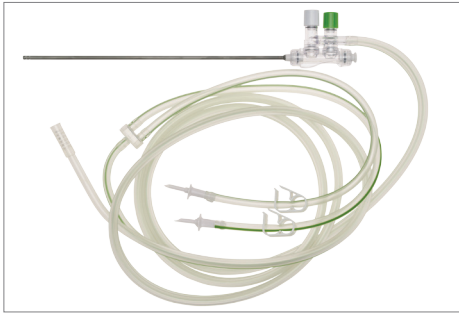

Zuig- en irrigatiesysteem



Zuig- en irrigatiesysteem – handgreep

Ref. nr.	Beschrijving	Afmetingen	Lengte	Stuks/disp.
899107	Zuig- en irrigatiesysteem met dubbele spike	5mm	33cm	10
899108	Zuig- en irrigatiesysteem met dubbele spike	5mm	45cm	10
899109	Zuig- en irrigatiesonde	10mm	33cm	10

Alle zuig- en irrigatiesets worden vervaardigd met DEHP-vrije slangen.

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
 Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
 De Mölnlycke naam, logo en merknaam zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
 © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00581709)

