


Mölnlycke® Pulsed Lavage

Volledig op maat gemaakte orthopedische oplossingen



Uitvoering met geïntegreerde batterij

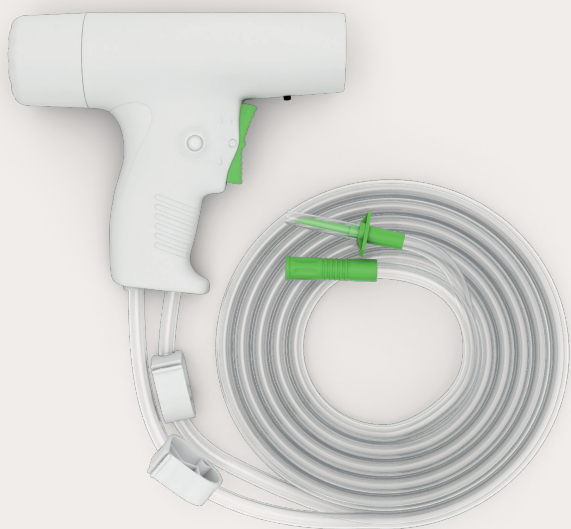

Uitvoering op netstroom

Mölnlycke Pulsed Lavage is DEHP vrij

Ons Pulsed Lavage voor eenmalig gebruik reinigt het bot doeltreffend en verwijdert resten tijdens volledige gewrichtsvervangingen. Hierdoor dringt het cement beter in het poreuze bot voor een potentieel sterkere fixatie van het implantaat en heeft men minder revisies. Het is ook een doeltreffend systeem om wonden te reinigen en vuil en afgestorven weefsel te verwijderen.

Verkrijgbaar in twee versies

- **Netspanningsadapter:** een milieuvriendelijke uitvoering die alkalinebatterijen overbodig maakt. Handstuk voor eenmalig gebruik en herbruikbare netspanningsadapter.
- **Geïntegreerde batterij:** een flexibele en mobiele versie met in het handstuk geïntegreerd batterijpack, voor een snelle en gemakkelijke verwijdering van de batterijen.

Alles inbegrepen betekent geen verborgen kosten

- Ergonomisch en comfortabel handstuk
- Kort opzetstuk met dubbel spatscherm
- Lang opzetstuk voor het femurkanaal
- Geïntegreerde aspiratie en irrigatie
- Reinigingsstaafje om eventuele vernauwingen in het opzetstuk voor het femurkanaal te verwijderen

Afzonderlijk verpakt of als onderdeel van ProcedurePak® trays

- Voeg Pulsed Lavage toe aan uw op maat gemaakte procedure-specifieke tray voor meer efficiëntie
- Ook verkrijgbaar als los steriel verpakt product

Revisie-opzetstuk met filter

- Voor heuprevisies hebben wij een speciaal opzetstuk voor het verwerken van kleine bot- en cementdeeltjes. Verkrijgbaar als los steriel verpakt product.

* De wettelijke fabrikant van Pulsed Lavage is Kaiser Medical Technology.

Mölnlycke® Pulsed Lavage – Uitvoering op netstroom

Steriele afzonderlijke verpakking

Ref. Nr.	Omschrijving
9750000	Pulsed Lavage Systeem, netstroom
9752000	Netspanningsadapter (AC100~240V)
9751000	Coaxiaal opzetstuk met femurborstel
9751001	Cone opzetstuk
9751002	Coaxiaal opzetstuk
9751003	Opzetstuk voor heuprevisie



Uitvoering op netstroom



Netspanningsadapter



Coaxiaal opzetstuk met kanaalborsteltje




Opzetstuk voor heuprevisie

Beschikbaar in ProcedurePak®

Ref. Nr.	Omschrijving
2322130-00	Pulsed Lavage Systeem, netstroom
2320481-00	Coaxiaal opzetstuk met femurborstel



Cone opzetstuk

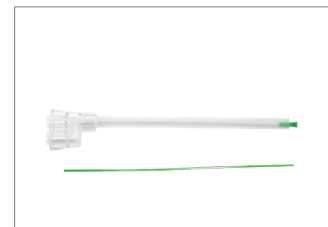


Coaxiaal opzetstuk


Mölnlycke® Pulsed Lavage – Uitvoering met geïntegreerde batterij

Steriele afzonderlijke verpakking


Ref. Nr.	Omschrijving
9750003	Pulsed Lavage System, geïntegreerde batterij
9751004	Coaxiaal opzetstuk met femurborstel
9751005	Cone opzetstuk
9751006	Coaxiaal opzetstuk
9751007	Opzetstuk voor heuprevisie

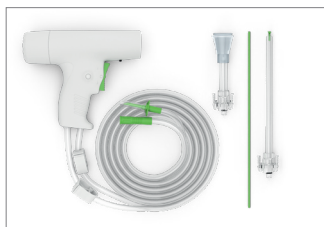


Uitvoering geïntegreerde batterij

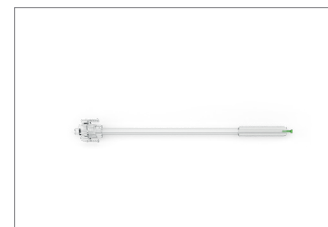

Coaxiaal opzetstuk met kanaalborsteltje

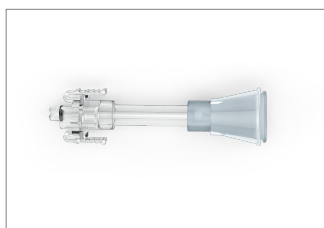


Cone opzetstuk

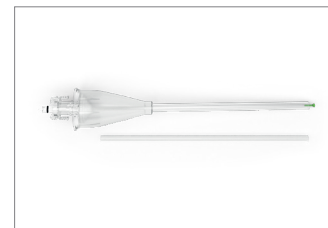

Opzetstuk voor heuprevisie

Beschikbaar in ProcedurePak®

Ref. Nr.	Omschrijving
2324050-00	Pulsed Lavage Systeem, geïntegreerde batterij
2325431-00	Coaxiaal opzetstuk met femurborstel

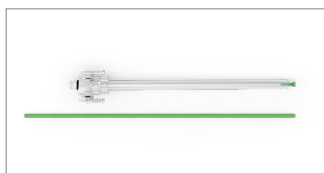

Coaxiaal opzetstuk

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Tel. 076 521 96 63.
 Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50.
 De Mölnlycke naam, logo en merknaam zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
 © 2022 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden.

