

## Schuimverband met exsudaatafvoerkanalen

### Snelle absorptie van alle types wondexsudaat, ook viskeus.<sup>1</sup>

Mepilex® XT is een zacht, flexibel schuimverband<sup>2</sup> geschikt voor de behandeling van weinig tot matig exsuderende chronische wonden in alle stadia van de wondheling. Het beschikt over unieke, geïntegreerde exsudaatafvoerkanalen die zowel laag als hoog viskeus exsudaat absorberen<sup>3</sup>.

#### Snellere absorptie


- Absorbeert elk type<sup>1</sup> exsudaat sneller dan andere schuimverbanden

#### Flexibel verband

- Geschikt voor weinig tot matig exsuderende wonden, inclusief wonden met fibrineus beslag<sup>3</sup>
- Vereenvoudigt het verbandbeleid: geschikt voor alle types wondexsudaat


#### Klinisch bewezen: Safetac technologie

- Minder pijn tijdens verbandwissels<sup>3,4</sup>
- Minder trauma voor de wond en de omliggende huid<sup>2,4,5</sup>
- Minder risico op lekkage en maceratie<sup>6</sup>

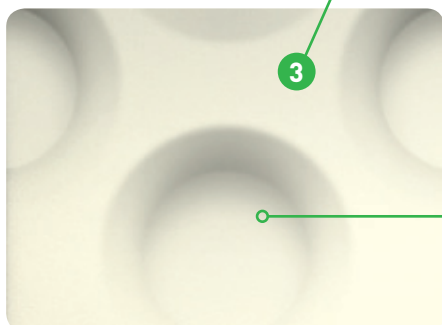

- 1 Polyurethaan ruglaag**  
Bacterie, virus en douchebestendige film (microben > 25nm).<sup>7</sup>
- 2 Absorptielaag**  
Polyurethaan schuimkussen met unieke **exsudaatafvoerkanalen**
- 3 Unieke exsudaatafvoerkanalen**
  - Absorberen hoog viskeus exsudaat, weg van het wondbed<sup>3</sup>
  - Minimaliseert het risico op maceratie<sup>6</sup>
- 4 Wondcontactlaag met Safetac® Technologie**


## Gebruiksaanwijzing

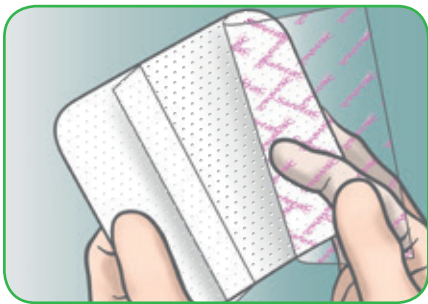

1. Reinig de wond in overeenstemming met lokale richtlijnen. Droog de omliggende huid zorgvuldig. Verwijder de schutbladen.



2. Mepilex XT moet de droge, omliggende huid met minstens 1-2 cm overlappen voor afmeting 10x10 cm en 5 cm voor de grotere maten om de omliggende huid te beschermen tegen maceratie en vervelling. Fixeer het verband goed. Indien nodig, kan Mepilex XT op maat van de wond worden geknipt. Niet uittrekken.

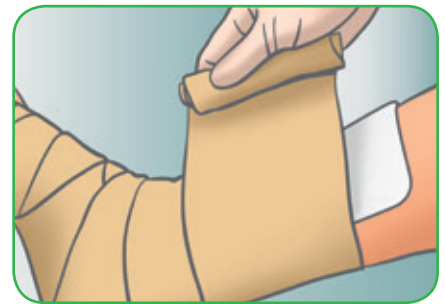

3. Fixeer, indien nodig, Mepilex XT met Tubifast 2 Way Stretch, een zwachtel of ander fixatiemiddel.

## Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik Mepilex XT niet bij patiënten waarvan bekend is dat zij gevoelig zijn voor één van de bestanddelen van het verband.
- Raadpleeg in geval van tekenen van klinische infectie een zorgverlener voor een zorgvuldige infectieverzorging.
- Gebruik Mepilex XT niet in combinatie met oxiderende middelen zoals hypochlorietoplossingen of waterstofperoxide.
- Mepilex XT kan gebruikt worden onder compressie.

## Frequentie van verbandwissel

Mepilex XT kan meerdere dagen ter plaatse blijven<sup>8</sup> afhankelijk van de conditie van de wond en de omgevende huid of volgens advies van de zorgverlener.

### Referenties:

1. Fluid handling and retention properties Mepilex XT: Report no. 20130123-006/20121107-014/20130729-001 (SMTL).
2. Meulenaire F and Fostier A. Local treatment of heel pressure ulcers with a silicone foam dressing. Poster presentation. WUWHS, 2008.
3. Fluid handling and retention properties with Viscous test Fluid Mepilex XT, Report No. 20130104-004/ 20121012-004/20130515-001/20130814-004(MHC).
4. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
5. Upton D and Solowiej K. The impact of traumatic vs conventional dressings on pain and stress. J Wound Care. 2012 May; 21(5):209-215.
6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
7. External Test Lab Report no. 413098 [Nelson Laboratories].
8. Eager CA. Comparison of two foams through the measurement of healing time, frequency of dressing changes and peri wound status. Poster presentation. Advanced Wound Care and Medical Research Forum on Wound Repair, 2001.
9. Meulenaire F and Fostier A. Local treatment of heel pressure ulcers with a silicone foam dressing. Poster presentation. WU WHS, 2008.
10. Biocompatibility Evaluation, Filed in MHC.

## Indicaties

Mepilex XT is geschikt voor verschillende exsuderende chronische wonden in alle genezingsfasen, zoals been- en voetulcera, doorligwonden en traumatische wonden.

Laag tot middelmatig exsudaatniveau, inclusief viskeus exsudaat. Gele, rode en roze fase van het genezingsproces.



## Mepilex XT assortiment (Steriel verpakt)

Artikelnr.	Afmeting	Stuks/RET	Stuks/TRP
211100	5 x 5	5	40
211100	10x10	5	70
211200	10x20	5	45
211300	15x15	5	25
211400	20x20	5	20

Ontdek meer op [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be) of [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl)

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstationstraat 72/2, 2600 Berchem, België. Tel +32 (0)3 286 89 50 - Fax +32 (0)3 286 89 52

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, 4800 DD - Breda, Nederland. Tel +31 (0)76 521 96 63 - Fax +31 (0)76 522 17 82

Mölnlycke Health Care, Mepilex® XT en Safetac® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care. ©

2018 Mölnlycke Health Care AB. All rechten voorbehouden.